



PT. MERSIFARMA TM.
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI - INDONESIA

FORMULIR PERMINTAAN PERLENGKAPAN PRODUKSI

Form. No 2PR00/FORM/107.03

Tgl. Berlaku :
16 Februari 2026

Dibuat oleh :
ELC

Tanggal :

27/26
27/02

No : 015/MFG/PROD/011/2026

Nama Barang :

Magnetic Stirrer Hotplate

Jumlah Permintaan :

1

Peralatan Baru / Penambahan / Penggantian :

Peralatan Baru

Alokasi : produksi Unit 1 Non Steril

Ruangan Mixing

Nama Mesin / Alat :

Magnetic Stirrer Hotplate

No. Inventaris :

Indikator Kerusakan :

-

Uraian Penjelasan (Alasan Rinci Penggunaan) :

Magnetic Stirrer Hotplate digunakan untuk mencampurkan dan memanaskan larutan agar homogen pada proses penyalutan tablet produk Ribon Tablet Salut Selaput (dengan kapasitas untuk 5 L)

Lampiran (v) :

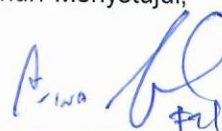
- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☐ | Berita Acara Kerusakan |
| ☐ | Form Service |
| ☐ | Foto Barang Rusak |
| ☐ | Bincard Penunjang / Kartu Stock Barang |
| ☒ | Foto / Drawing Peralatan Baru |

Pemohon,

 27/26
27/02

(Koordinator / Supervisor)

Mengetahui / Menyetujui,

 27/26
27/02

(Ast. Mgr. / Mgr. Produksi)

Lampiran

Routing Operations x solkyo HOTPLATE magnetic stirrer x jual 5 Liter Hot Plate Magnetic x +

shopee.co.id/product/846085348/25384886823?gads_t_sig=VTIGc2RHVmtYMTIxTFVSyVtrdENkY0RSanIKZU18U2Y2RTJzOS9meUtnZiRrNkVpeDhyMnZ0VExBeXJpW... Shopee

Shopee > Kesehatan > Alat Kesehatan > Alat Laboratorium > 5 Liter Hot Plate Magnetic Stirrer Lab Stirrer SH4 Magnet Heater SH-4

DIGILIFE



5 Liter Hot Plate Magnetic Stirrer Lab Stirrer SH4 Magnet Heater SH-4

Belum Ada Penilaian Laporkan

Rp3.800.000

Pengiriman ☐ Layanan Tidak Tersedia

Jaminan Shopee ☒ Bebas Pengembalian • Proteksi Kerusakan +

Kuantitas - 1 +

DIGILIFE DIGILIFE DIGILIFE DIGILIFE

14:02

Hotplate Magnetic stirer 5 Liter



PT. MERSIFARMA TM.
SUKABUMI-INDONESIA

CATATAN PENGOLAHAN BATCH
RIBAN TABLET SALUT SELAPUT 20 MG
IPJ00516

No. Dokumen : CPB/00516 A 00
Tgl. Berlaku : **23 OCT 2025**
Mfg Date :
Exp. Date :

No. Bets :

13. PROSES PEMBUATAN SUSPensi PENYALUT DAN PENYALUTAN TABLET

No.	Cara Kerja	Aktual	Tanggal / Jam		Paraf (Inisial)	
			Mulai	Selesai	Opr	Pengawas
Perhatian : Jangan lepas Label Timbang Bahan Baku atau Label Identitas Produk sebelum dilakukan proses pengolahan/pencampuran.						
1	Ke dalam yang sesuai, masukkan: ☐ Purified water (~2.7 L) 2.7 Kg Mixing dengan Magnetic Stirrer dengan kecepatan Stage no. 2 sampai terbentuk vortex.	Kecepatan : Stage Waktu : min				
2	Ke dalam wadah yang yang sesuai, masukkan: ☐ Opadry QX White 270.00 G ☐ Eurocert Brown HT 5.00 G ☐ Eurolake FD&C Red 40 1.00 G					
3	Grinding dengan mortir hingga homogen selama 15 menit ———> BAHAN PENYALUT PEWARNA	Waktu : min				
4	Ke dalam wadah yang berisi Purified Water, masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk : ☐ Bahan penyalut pewarna Mixing menggunakan Magnetic Stirrer dengan kecepatan stage no.2 selama 25 menit ———> SUSPENSI PENYALUT PEWARNA	Kecepatan : HZ Waktu : min				
5	Timbang SUSPENSI PENYALUTAN yang sudah dibuat.	Berat : G (Netto)				
6	Sebelum memulai proses penyalutan, timbang tablet inti per 20 pcs sebanyak 3 kali, mewakili bagian atas, tengah, bawah. $\frac{(Core A + Core T + Core B)}{(3 \times 20)} = \text{rata-rata per tablet inti (A mg)}$	Atas : mg Tengah : mg Bawah : mg Rata-rata : mg				
7	Lakukan pengeringan drum revolutioner pada mesin penyalutan Chengdong BGB 10 . Drum revolution : 2 Rpm Temp. hot air (inlet) : 60° C Lama pengeringan : 10 menit	Drum revolution : Rpm Temp. hot air (inlet) : ° C Lama pengeringan : min				
8	Masukkan tablet inti Riban 20 ke dalam drum mesin Chengdong BGB 10 dan lakukan pemanasan tablet dengan parameter berikut : Jarak sprayer : 15 - 20 cm Jumlah spray : 1 pcs Drum revolution : 2 - 6 Rpm Lama pemanasan : 15 menit (sekitar 5 menit diputar sekali) Suhu core : 35 - 40° C	Jarak ke core : cm Jumlah spray : Pcs Drum revolution : Rpm Lama pemanasan : min Suhu core : °C				

26/10/26

27/10/26

1 *[Signature]* 2 *ge* 3 *[Signature]* 4 *[Signature]* 5 *angle* 6 *[Signature]* 7 *[Signature]*