




ATT . DRAWING

IMP01.E-ATD

CUSTOMER	MERSIFARMA	NO.DRWG	M - STRL001
USER	IBU RENTI	PREPARED BY	RUDI (VNT)
MODEL	JUMPSUIT OVERALL FZIP	TGL	30 May 2024


DESIGN JUMPSUIT DEPT. STERILE

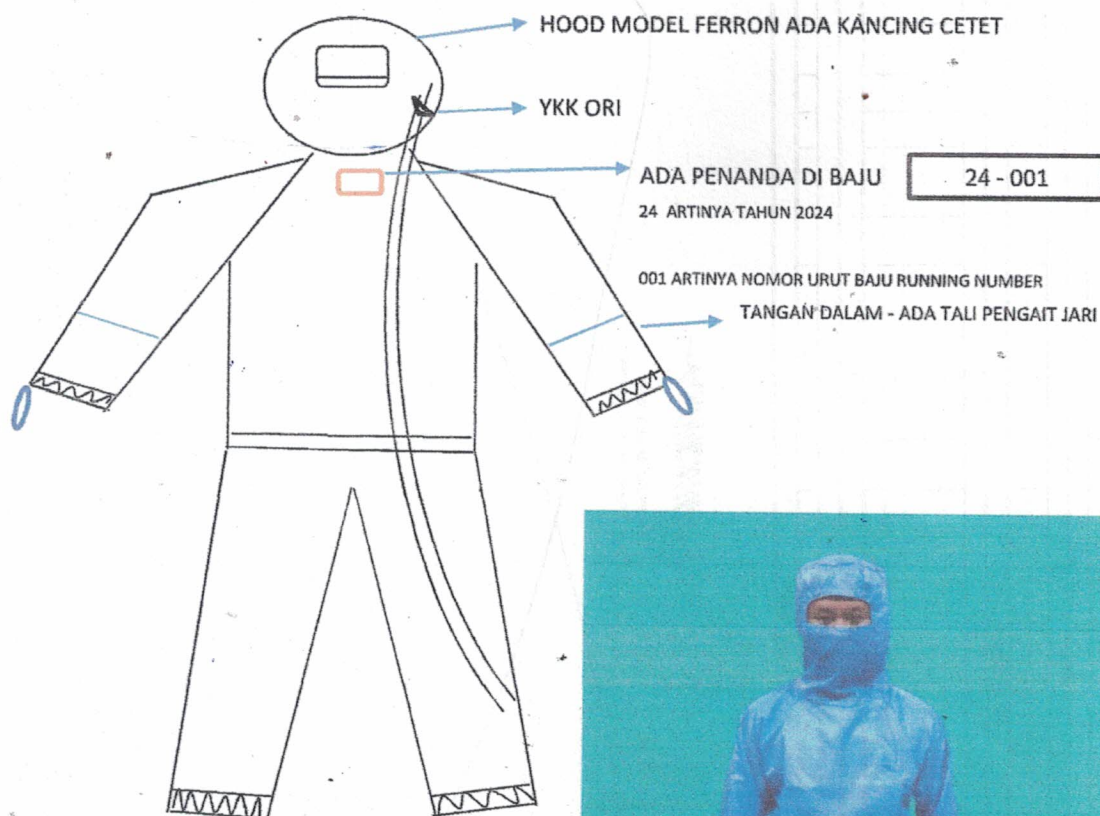

Untuk L dan XL ditambah lebar & pesak

Untuk XXL Ukuran Normal tambah pesak saja

KESIMPULAN NAIK 2 SIZE KESELURUHAN

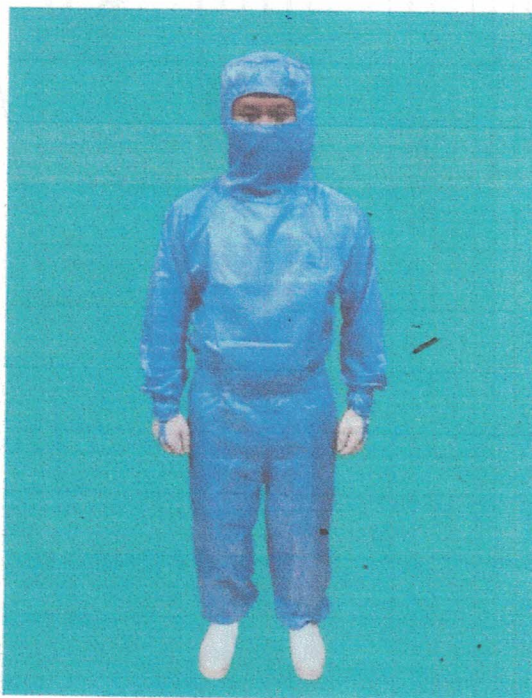

12/09/24 12/24 17/24
RUDI
VNT
MRS

KARET TANGAN	B12	KRT PINGGANG	100T	BY :	TGL :
KARET KAKI,	B12	ZIPER	YKK ORIGINAL	RUDI	30 May 2024





ATT . DRAWING

IMP01.E-ATD

CUSTOMER	MERSIFARMA	NO.DRWG		M - STRL002
USER	PAK BEN	PREPARED BY	RUDI (VNT) (r1)	
MODEL	BOOTHIES TABLEMAT	TGL	30 May 2024	

DESIGN BOOTIES TABLEMAT DEPT. STERILE

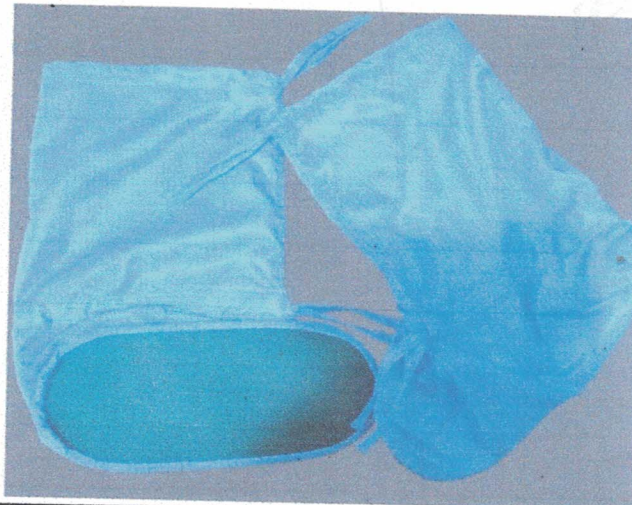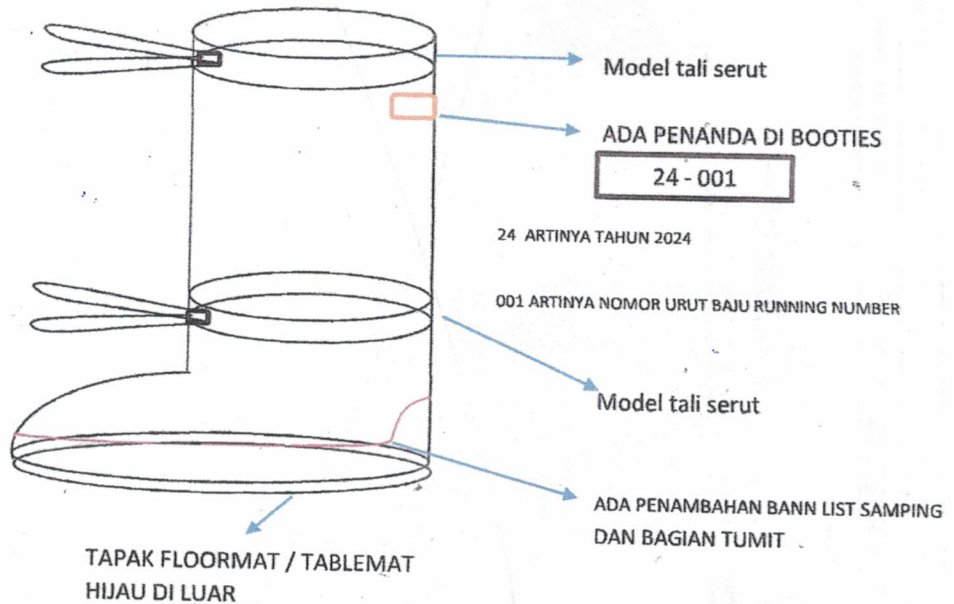

17/24
10/07
14/11/24
A. Andhika

12/24
07
mnn

KARET TANGAN		KRT PINGGANG		BY :	TGL :
KARET KAKI		ZIPER	YKK ORIGINAL	RUDI (r1)	30 May 2024

**mersi**PT. MERSIFARMA TM.
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI-INDONESIA**LAPORAN STUDY SIKLUS
WEARPACK PRODUKSI
STERIL**

Halaman	: Page 46 of 46
No. Dokumen	: 2QA00/LPLLN/091.00
Tanggal berlaku	: 30 April 2024
Menggantikan No.	: -
Tanggal	: -

4.	23 Februari 2024	Pemakaian ke 40	Perut	15	MS
			Lengan kanan	0	MS
			Lengan kiri	5	MS
			Kaki kanan	10	MS
			Kaki kiri	15	MS
			Shoe cover kanan	15	MS
			Shoe cover kiri	5	MS
5.	28 Maret 2024	Pemakaian ke 60	Dahi	25	MS
			Masker	15	MS
			Perut	20	MS
			Lengan kanan	5	MS
			Lengan kiri	5	MS
			Kaki kanan	10	MS
			Kaki kiri	20	MS
			Shoe cover kanan	25	MS
			Shoe cover kiri	15	MS

10. Verifikasi Hasil Pemeriksaan :

DITERIMA

v

DITOLAK

Keterangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan *study* siklus pemakaian wearpack, batas penggunaan wearpack produksi steril adalah 60 x pemakaian. Dikarenakan setelah 60 x pemakaian wearpack pengujian robek tidak layak pakai pada pemakaian ke 64 x.

	Nama	Paraf	Tanggal
Dilakukan Oleh:	Febriana Dwi Andah		29/04/24
Dilakukan Oleh:	Sipa Melviani		29/04/24
Diperiksa Oleh:	Faisa Oktavia		25/04/24
Disetujui Oleh:	Sely		26/04/24